




APEL CO., LTD. JAPAN

MADE IN JAPAN

State-of-the-art
Colorimeter

AP-1101

Компактный фотоэлектроколориметр (ФЭК)

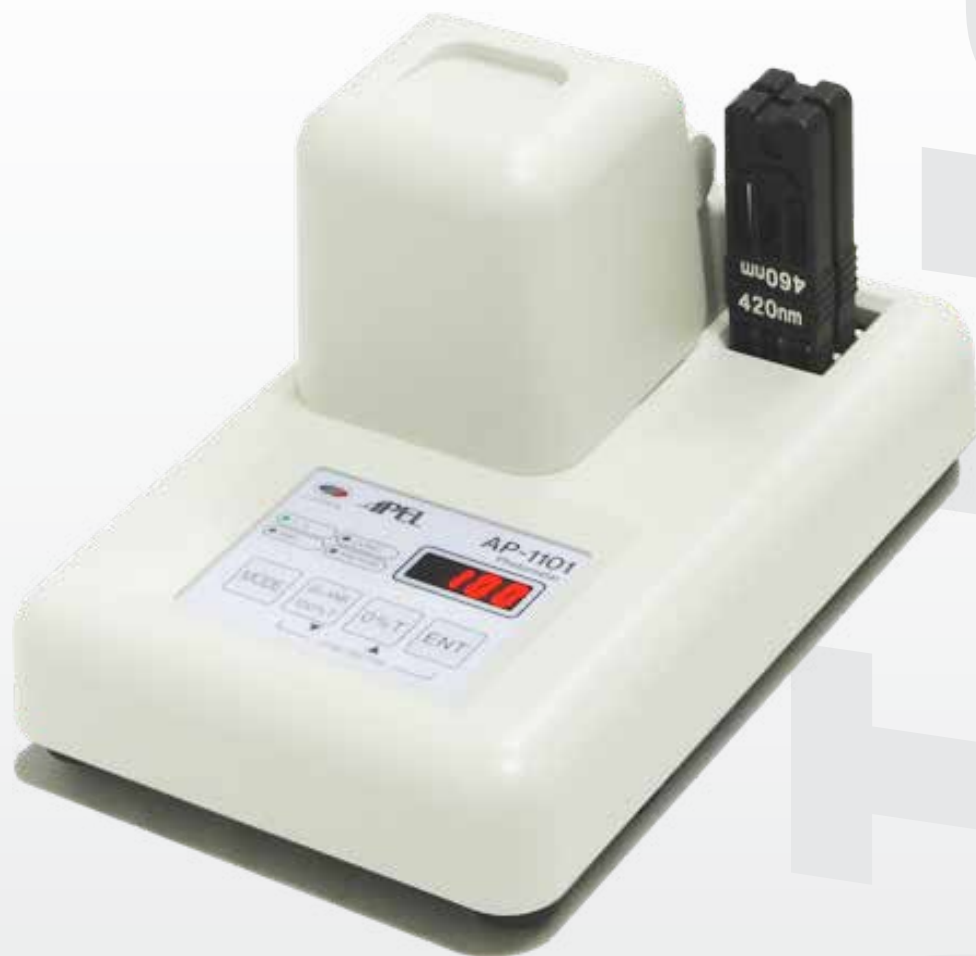

CE

**Компактный и простой
в использовании**

Яркий светодиодный индикатор яркости

В качестве источника света используется светодиод высокой эффективности и яркой интенсивности

Прямое считывание концентраций

Устанавливая стандартное значение концентрации, можно напрямую считывать значение каждого образца

Можно использовать квадратные и круглые кюветы

В дополнение к квадратным кюветам, круглые кюветы также могут быть использованы только с помощью прилагаемого адаптера

Маленький объем пробы

Минимальный объем пробы составляет всего 1 мл



AP-1101

Компактный фотоэлектроколориметр



Спецификации:

Дисплей	3 1/2 цифровой LED
Встроенные фильтры	420 460 510 540 600
Фотометрический диапазон	0 - 100% T 0 - 1,999 A 0 - 1999 C (0 - 1999 F)
Объем пробы	1,0 мл (минимум)
Источник света	Белый светодиод высокой яркости
Автоматическое обнуление	Предусмотрено
Мощность	Внешний блок питания
Габариты	150 x 230 x 135 мм
Вес	0,65 кг

Стандартные принадлежности:

Описание	Количество
Фильтры (420 нм, 460 нм)	1 шт.
Фильтры (510 нм, 540 нм)	1 шт.
Фильтры (600 нм)	1 шт.
Квадратные кюветы	2 шт.
Пробирки	2 шт.
Виниловая крышка от пыли	1 шт.
Блок питания (внешний)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

MADE IN JAPAN



APEL CO., LTD. JAPAN

Website www.apel-jp.ru

Website www.apel.co.jp