



APEL CO., LTD. JAPAN

MADE IN JAPAN

BR-502

**State-of-the-art
Bilirubin Meter**

Билирубинометр с интеллектуальным управлением



**Включите и начните измерение
после 120 сек. прогрева**

**Очень быстрые измерения
Достаточно 1 секунды для измерения**

Не требуется замена лампы

**BR-502 не требует замены лампы благодаря
светодиодному источнику света**

Компактный и легкий

BR-502 занимает мало места и весит всего 1,1 кг

BR 502 калибруется стандартным раствором на регулярной основе. Для ежедневной калибровки больше не требуется стандартная калибровка


**Free of
calibration
hassle**

После каждого включения требуется обнуление с помощью капилляра с дистиллированной водой



BR-502

Билирубинометр с интеллектуальным управлением

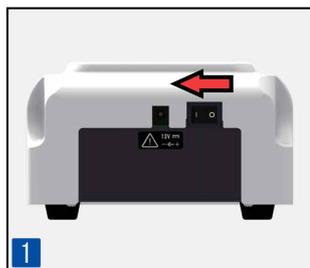

1
Включите переключатель на задней панели



2
После прогрева (2 минуты) установите "0" с помощью капилляра с дистиллированной водой



3
Вставьте капилляр (содержащий образец) в держатель



4
Результат появляется очень быстро (в течение одной секунды)

Спецификации:

Метод	Двухволновое измерение
Диапазон измерений	0-30 мг/дл (общий билирубин)
Точность измерений	±5%
Объем пробы	50-60 мкл
Дисплей	3-1/2 цифровой LED (7 сегментов)
Емкость для образца	Капилляр (гематокритный)
Источник света	Белый светодиод высокой яркости
Датчик	Кремниевый фотозлемент
Мощность	2В (максимум)
Габариты	150 x 225 x 90 мм
Вес	1,0 кг

Комплектация:

Описание	Количество
Капилляры гепаринизированные (красная крышка флакона)	1 флакон (100 шт.)
Капилляры стандартные (синяя крышка флакона)	1 флакон (100 шт.)
Подставка для капилляров	1 шт.
Стандартный раствор	2 флакона
Блок питания (внешний)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

MADE IN JAPAN



APEL CO., LTD. JAPAN

Website www.apel-jp.ru

Website www.apel.co.jp